



INSTRUMENTATION INSTRUMENTARIUM

www.gmidental.com



Made in Spain



Index - Inhalt

INSTRUMENTAL

- Clés de serrage gmi
 - Clés à cliquet
 - Clés manuelles
 - Clés connexion contre-angle
 - Adaptateurs
 - Clé pour rétentions
 - Clés d'extraction
 - Clés de laboratoire
- Instruments chirurgicaux gmi
 - Forets chirurgicaux
 - Tarauds
 - Arrêts de forage
 - Accessoires chirurgicaux

KITS

- Kit de tarauds gmi
- Kit d'ostéotomie et d'expansion osseuse gmi
- Kit prothétique gmi
- Kit de forets courts gmi
- Kit de forets gmi frontier/avantgard
- Kit de forets gmi PEAK
- Kit d'arrêt forage gmi
- Kits insertion basiques gmi
- Kit Chirurgie guidée full gmi frontier
- Kit Chirurgie guidée gmi frontier
- Description de l'étiquetage

INSTRUMENTARIUM

- gmi Drehmomentschlüssel 4
 - Ratschenschlüssel 4
 - Handschlüssel 7
 - Winkelstückverbindungsschlüssel 8
 - Adapter 10
 - Schlüssel für Retentionen 10
 - Implantatextraktionsschlüssel 11
 - Laborschlüssel 12
- gmi chirurgisches Instrumentarium 13
 - Chirurgische Bohrer 13
 - Gewindeformer 18
 - Bohrstopps 19
 - Chirurgisches Zubehörteile 20

KITS

- gmi Gewindeformer-Kit 22
- gmi Knochenverdichter-Kit 22
- gmi Prothetik-Kit 23
- gmi kurze Bohrer-kit 23
- gmi frontier/avantgard chirurgische Bohrer-kit 24
- gmi PEAK chirurgische Bohrer-kit 24
- gmi Bohrstop-Kit 25
- gmi Basis-Insertions-Kits 26
- gmi frontier Komplett Geführte Chirurgische-kit 28
- gmi frontier Geführte Chirurgische-kit 29
- Beschreibung der Etikettierung 30

- gmi phoenix
- gmi frontier
- gmi frontier PEAK
- gmi avantgard
- gmi avantgard PEAK
- gmi monolith
- Tous les systèmes - Alle Systeme

Clés de serrage gmi - gmi Drehmomentschlüssel

Les clés de serrage gmi sont divisées en cinq groupes basiques : clés manuelles, clés à cliquet, clés à connexion CA, clés de laboratoire et adaptateurs. Les clés manuelles sont utilisées pour le serrage des couvercles de fermeture et les piliers de cicatrisation. Les clés à cliquet et de connexion CA sont utilisées aussi bien pour l'insertion des implants que pour le serrage définitif des attachements et des vis de clinique. Les clés de laboratoire sont pensées pour faciliter le travail du laboratoire prothétique. Pour finir, les adaptateurs servent de lien entre les clés manuelles et à cliquet et les pointes à connexion CA.

Die gmi Drehmomentschlüssel sind in fünf Gruppen unterteilt: Handschlüssel, Ratschenschlüssel, Winkelstückverbindingsschlüssel, Laborschlüssel und Adapter. Handschlüssel werden zum Anziehen der Verschlusschrauben und der Gingivaformer benutzt. Ratschenschlüssel und Winkelstückverbindingsschlüssel werden sowohl für die Insertion der Implantate als auch für das endgültige Anziehen der Aufsätze und der Klinikschrauben verwendet. Laborschlüssel sind zur leichteren Arbeit des Dentallabors vorgesehen. Die Adapter schließlich dienen als Verbindung zwischen Hand- und Ratschenschlüsseln sowie der Spitzen mit Winkelstückverbinding.

Clés à cliquet - Ratschenschlüssel

Principales caractéristiques

- Clés usinées en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Clés conçues pour une utilisation répétée et fiable pendant toute leur vie utile.
- Clé dynamométrique pour couples de serrage à 15, 30, 45 et 60 N-cm.
- Orifice pour passer le fil de sécurité et éviter une ingestion accidentelle.
- Joint torique de rétention pour clé à clé dynamométrique.
- Conception qui permet une double utilisation : manuelle et avec clé dynamométrique.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Schlüssel.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Für wiederholten und zuverlässigen Gebrauch während der ganzen Lebensdauer entwickelte Schlüssel.
- TI Ratschenschlüssel für Anzugdrehmomente bis 15, 30, 45 und 60 N-cm.
- Loch zum Durchführen von Sicherheitsfaden und um zufälliges Schlucken zu vermeiden.
- Retentionsring für TI Ratsche.
- Ausführung für doppelten Gebrauch: manuell und mit Ratschenschlüssel.



Clé pilier boule Kugelaufbau schlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
○ 2,45 ● ● ●	18,00	KYLoC0065

Clé à cliquet IP TI Ratschenschlüssel	
Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
96,00 ○	KYLoF0113

Clés hexagonales Sechskantschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
○ 1,20 ○	Courte • Kurz - 21,40	KYLoF0128
	Longue • Lang - 28,40	KYLoF0129

Clés à cliquet - Ratschenschlüssel



Clés TX Schlüssel TX		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
 TX   	Courte • Kurz - 19,20	KYLoF0177
	Longue • Lang - 27,70	KYLoF0178



Clé pilier multi-esthétique Schlüssel für multi-ästhetische Abutment		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
 2,50  	21,00	KYLoC0098



Clé multi/bio-esthétique Multi/bio-ästhetische Schlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
 2,00    	17,00	KYLoC0149



Clés porte-implant Phoenix / Avantgard Phoenix / Avantgard sechskanthschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
 3,00 	Courte • Kurz - 15,50	KYLoF0123
	Longue • Lang - 21,50	KYLoF0124
 3,00 	Courte • Kurz - 15,50	KYLoF0137
	Longue • Lang - 21,50	KYLoF0138

 Phoenix  Avantgard

Clés à cliquet - Ratschenschlüssel



Clés d'insertion Phoenix Phoenix Insertionsschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,70 ●	23,00	KYLoFo099
◇ 2,40 ●	23,00	KYLoFo100



Clés d'insertion Avantgard PEAK Avantgard PEAK Insetionsschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
RP ●	Courte • Kurz - 20,00	KYLoCo157
	Longue • Lang - 26,00	KYLoCo162



Clés porte-implant Frontier Frontier Sechskanthandschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,45 ●●	Courte • Kurz - 16,80	KYLoFo096
	Longue • Lang - 22,80	KYLoFo111



Clé porte-implant Monolith Monolith Sechskanthandschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,50 ●	15,50	KYLoFo139

Clés à cliquet - Ratschenschlüssel



Clés pilier multi-esthétiques inclinées
Schlüssel angewinkelte multi-ästhetische Abutment

Connexion (mm) Verbindung	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 1,20 ● ● ● ● ●	25,40	KYLoF0130

Clés manuelles - Handschlüssel

Principales caractéristiques

- Clés usinées en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Clés conçues pour une utilisation répétée et fiable pendant toute leur vie utile.
- Fraisages longitudinaux anti-glissement.
- Orifice pour passer le fil de sécurité et éviter une ingestion accidentelle.
- Clé hexagonale e/f 0,80 mm pour couvercle de fermeture d'implant PL-Ø3,30 mm.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Schlüssel.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Für wiederholten und zuverlässigen Gebrauch während der ganzen Lebensdauer entwickelte Schlüssel.
- Anti-Rutsch Längsbohrungen.
- Loch zum Durchführen von Sicherheitsfaden und um zufälliges Schlucken zu vermeiden.
- e/c 0,80 mm Sechskantschlüssel für Verschlusschrauben Implantat PL-Ø3,30 mm.



Clé hexagonale manuelle fixe
Fester Sechskanthandschlüssel

Connexion (mm) Verbindung	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 1,20 ●	20,00	KYLoC0011
◇ 0,80 ●	20,00	KYLoC0092



Clé manuelle pour transfert
Handschlüssel für Träger

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 4,00 ● ● ●	83,00	KYLoC0093

Clés de connexion contre-angle - Winkelstückverbindungsschlüssel

Principales caractéristiques

- Clés usinées en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Clés conçues pour une utilisation répétée et fiable pendant toute leur vie utile.
- Connexion pour contre-angle universel $\varnothing 2,35$ mm.
- Compatibles avec adaptateur cliquet porte-pointes réf. : KYLoF0022.
- L'extension augmente la longueur des forets de 15 mm.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Schlüssel.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Für wiederholten und zuverlässigen Gebrauch während der ganzen Lebensdauer entwickelte Schlüssel.
- Verbindung für Universalwinkelstück $\varnothing 2,35$ mm.
- Kompatibles mit Adapter für Spitzen-Halterratsche Ref.: KYLoF0022.
- Durch die Verlängerung erhöht sich die Länge der Bohrer um 15 mm.



Clés hexagonales Sechskantschlüssel		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
1,20	Courte • Kurz - 18,00	KYLoC0063
	Moyenne • Mittel - 23,00	KYLoC0004
	Longue • Lang - 30,00	KYLoC0064



Clés TX Schlüssel TX		
Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
TX	Courte • Kurz - 24,00	KYLoC0179
	Longue • Lang - 30,00	KYLoC0158



Extension forets Bohrerverlängerung	
Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
28,00	KYLoC0023

Clés de connexion contre-angle - Winkelstückverbindungsschlüssel



● Phoenix ● Avantgard

Clés porte-implant Frontier
Frontier Übertragungsschlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,45 ●	Courte • Kurz - 29,50	KYLoFo091
	Longue • Lang - 35,00	KYLoFo110

Clés porte-implant Avantgard PEAK
Avantgard PEAK Übertragungsschlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
RP ●	Courte • Kurz - 27,20	KYLoCo151
	Longue • Lang - 33,20	KYLoCo163

Clés porte-implant Phoenix / Avantgard
Phoenix / Avantgard Übertragungsschlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 3,00 ●	22,00	KYLoFo122
◇ 3,00 ●	22,00	KYLoFo136

Clé porte-implant Monolith
Monolith Übertragungsschlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,50 ●	22,00	KYLoFo140

Clé multi/bio-esthétique
Multi/bio-ästhetische Schlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
◇ 2,00 ●●●●●	28,00	KYLoCo170

Adaptateurs - Adapter

Principales caractéristiques

- Adaptateur usiné en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Adaptateurs porte-pointes avec connexion pour clés de contre-angle universel Ø2,35 mm.
- Orifice pour passer le fil de sécurité et éviter une ingestion accidentelle.
- Joint torique de maintien pour clé dynamométrique.
- Conception qui permet une double utilisation : manuelle et avec clé à cliquet.



Hauptmerkmale

- Aus rostfreiem Stahl bearbeitete Adapter.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Spitzenhalter-Adapter mit Anschluss für Universalwinkelstückschlüssel Ø2,35 mm.
- Loch zum Durchführen von Sicherheitsfaden und um zufälliges Schlucken zu vermeiden.
- Retentionsring für TI Ratsche.
- Ausführung für doppelten Gebrauch: manuell und mit Ratschenschlüssel.

Adaptateur clef CA

Adapter für Spitzenhalter-Ratsche

Longueur (mm)
Länge (mm)

10,80 ○

Référence
Referenz

KYLoF0022

Adaptateur clef carrée

Quadratischer Schlüsseladapter

Longueur (mm)
Länge (mm)

6,80 ●●●●●

Référence
Referenz

KYLoC0113

Clé pour rétentions - Schlüssel für Retentionen

Principales caractéristiques

- Permet d'insérer et de retirer les coiffes de rétention des piliers boule et Equator.
- Un seul extracteur pour les deux systèmes de rétention.
- Tige d'insertion interchangeable pour piliers boule et Equator.

Hauptmerkmale

- Ermöglicht das Einsetzen und Entfernen von Kappen für Kugel- und Mittelstifte.
- Einzigiger Extrakteur für beide Extraktionssysteme.
- Austauschbarer Insertionsschaft für Kugel- und Mittelstifte.



Inserteur / extracteur de coiffes Kappeneinführer / Kappenzieher

Référence
Referenz

RH485IC ○

Clés d'extraction implant - Implantat Extraktion Schlüssel

Principales caractéristiques

- Adaptateur usiné en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Couple maximum : 200 N·cm.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeiteter Adapter.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Anzugsmoment maximal: 200 N·cm.



Clé d'extraction implant
Implantat Extraktion Schlüssel

Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
26,80 ○	KYLoC0131

Clés d'extraction piliers - Abutment Extraktion Schlüssel



Extracteur piliers Avantgard
Avantgard Abutment - Entfernungswerkzeug

Plateforme (mm) Plattform (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
RP ●●	27,80	KYLoF0134
WP ●	27,80	KYLoF0135



Extracteur piliers Monolith
Monolith Abutment - Entfernungswerkzeug

Longitud (mm) Length (mm)	Référence Referenz
27,80 ●	KYLoF0143

Kit d'extraction de vis cassées - Kit für die Entfernung beschädigter Schrauben

Principales caractéristiques

- Permettent d'extraire les vis cassées à l'intérieur du filetage de l'implant, évitant ainsi d'avoir à retirer l'implant.

Hauptmerkmale

- Ermöglicht die Entfernung beschädigter Schrauben aus dem Gewindeinneren des Implantats, ohne dass es entnommen werden muss.



Clés d'extraction de vis cassées Schlüssel zur Entfernung beschädigter Schrauben

	Description Beschreibung	Référence Referenz Ref.
● ●	Clé d'extraction Frontier	Frontier Extraktion Schlüssel
●	Clé d'extraction Phoenix	Phoenix Extraktion Schlüssel
● ●	Foret spéciale	Bohrer Speziell

Clés laboratoire - Laborschlüssel

Principales caractéristiques

- Clés usinées en acier inoxydable de haute qualité.
- Les pointes pour le manche universel permettent un fraisage commode dans n'importe quelle direction pour s'adapter aux besoins de la prothèse.
- Fraisages longitudinaux anti-glissement.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure.
- Clé manuelle de laboratoire avec manche hexagonal en aluminium.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Schlüssel.
- Die Spitze für den Universalgriff gestatten bequemes Bohren in alle Richtungen je nach den Bedürfnissen des Zahntechnikers.
- Anti-Rutsch Längsbohrungen.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Manueller Laborschraubenschlüssel mit Sechskantaluminiumgriff.



Manche universel Universalgriff

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
4,00 ● ● ● ● ●	80,00	KYLoF0076

Clé hexagonale de laboratoire Laborsechskantsschlüssel

Connexion (mm) Verbindung (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
○ 1,20 ○	54,00	KYLoF0006

Clés laboratoire - Laborschlüssel



Pointes pour manche universel Spitze für Universalgriff		
Hex. Impl. (mm)	Plateforme (mm) Plattform (mm)	Référence Referenz
○ 2,40 - 2,70 ●	Ø3,30 - Ø4,10	KYLoC0103
○ 2,70 - 3,40 ●	Ø5,10	KYLoC0104
○ 2,45 ●●	RP - WP	KYLoC0105
●●	RP - WP	KYLoC0137

Instruments chirurgicaux gmi - gmi Chirurgisches Instrumentarium

Les instruments chirurgicaux comprend tout le matériel nécessaire pour la correcte mise en place de chaque modèle d'implant. Elle se divise en trois groupes basiques : les forets chirurgicales, les accessoires chirurgicaux (paralléliseurs, mesureurs de profondeur et trépan gingivaux) et les pièces mâles ou tiges à fileter. Les instruments chirurgicaux gmi sont fabriqués en acier inoxydable de la plus haute qualité et les éléments qui subissent une plus grande usure sont recouverts avec des traitements de surface qui leur confèrent une plus grande résistance à l'usure, allongeant ainsi leur durée de vie.

Das chirurgische Instrumentarium umfasst das gesamte erforderliche Material für das fachgemäße Einsetzen des jeweiligen Implantatmodells. Es besteht aus drei Gruppen: chirurgische Bohrer, chirurgische Zubehörteile (Parallelisierungspfosten, Tiefenmesser und Gingivastanzen) sowie Zahnkerne oder Gewindeformer. Das gmi chirurgische Instrumentarium ist aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl gefertigt und die verschleißanfälligsten Elemente verfügen über Oberflächenbehandlungen für höheren Verschleißwiderstand und somit längere Lebensdauer.

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer

Les forets sont les instruments chirurgicaux qui permettent de perforer l'os à un diamètre et une profondeur déterminés en fonction de la taille de l'implant à mettre en place. Ils se divisent en quatre groupes selon la fonction de chaque type de foret :

- Foret pointeur: foret avec pointe flamme conçue pour rompre l'os cortical.
- Foret pilote: foret pour approfondir et orienter la séquences de forage.
- Foret guide: foret de deux diamètres qui servira de guide à la foret de Ø2,80 mm.
- Forets: forets qui permettent d'ajuster le diamètre et la profondeur du logement de l'implant.

Principales caractéristiques

- Forets à irrigation externe usinées en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement de surface pour augmenter la résistance à l'usure et faciliter le nettoyage.
- Nettoyage et entretien simple et efficace, sans noircissement de la foret après usage.
- Angles d'aiguisage conçus pour maximiser le pouvoir de coupe à basses rotation.
- Marquage laser des longueurs très contrastés.
- Forets à chanfreiner codifiées par couleur.

Bohrer sind chirurgische Instrumente zum Perforieren des Knochens mit vorgegebenem Durchmesser und Tiefe gemäß der Größe der einzusetzenden Implantate. Sie sind je nach der Funktion des Bohrertyps in vier Gruppen unterteilt:

- lanzenettenförmiger Bohrer Bohrer mit lanzenförmiger Spitze zum Durchbrechen der kortikalen Knochenschicht.
- Pilotbohrer Bohrer zur Vertiefung und Ausrichtung der Bohrsequenz.
- Führungsbohrer: Bohrer mit zwei Durchmessern zur Führung des Ø2,80 mm-Bohrers.
- Bohrer: Bohrer zur Justierung des Durchmessers und der Tiefe des Implantatlagers.

Hauptmerkmale

- in hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Bohrer mit Außenkühlung.
- Oberflächenbearbeitung für größeren Verschleißwiderstand und leichtere Reinigung.
- Einfache und effektive Reinigung und Instandhaltung ohne Dunkelwerden des Bohrers nach Gebrauch.
- Besonders entwickelte Anschliffwinkel zur Erhöhung der Schnittkraft bei niedriger Umdrehungszahl.
- Kontrastreiche Tiefenmarkierungen.
- Farbkodierte Versenkbohrer.

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer



Foret pointeur Lanzenförmige Bohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 ● ● ●	32,00	KYFoC1225



Foret pointeur avec butée Monolith Monolith Lanzenförmige Bohrer mit Anschlag		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø1,80 ●	32,00	KYFoC1301



Foret pilote Pilotbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 ● ● ●	36,00	KYFoC2221
	30,00	KYFoC2222
ø2,50 ● ●	36,00	KYFoC2250





Foret guide Führungsbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 - ø2,70 ●	29,00	KYFoC3227

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer



Foret conique Versenkbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø3,30 ●	25,00	KYFoC4133
ø3,75 ●	25,00	KYFoC4138
ø4,25 ●	25,00	KYFoC4142
ø4,75 ●	25,00	KYFoC4146
ø5,75 ●	25,00	KYFoC4160
ø3,75 ●	26,40	KYFoC4238
ø4,25 ●	26,40	KYFoC4242
ø4,75 ●	26,40	KYFoC4246
ø5,75 ●	26,40	KYFoC4260

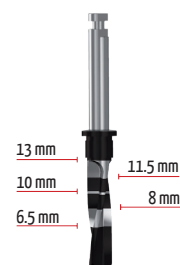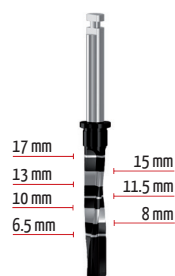

Forets hélicoïdaux Spiralbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,80 ●●●	36,00	KYFoC0128
	30,00	KYFoC0228
ø3,00 ●●●	36,00	KYFoC0130
	30,00	KYFoC0230
ø3,25 ●	36,00	KYFoC0132
	30,00	KYFoC0232
ø3,50 ●●●	36,00	KYFoC0135
	30,00	KYFoC0235
ø3,75 ●	36,00	KYFoC0138
	30,00	KYFoC0238
ø4,00 ●●	36,00	KYFoC0140
	30,00	KYFoC0240
ø4,25 ●	36,00	KYFoC0143
	30,00	KYFoC0243
ø4,50 ●●	36,00	KYFoC0145
	30,00	KYFoC0245
ø5,10 ●●●	36,00	KYFoC0151
	30,00	KYFoC0251
ø5,40 ●	36,00	KYFoC0154
	30,00	KYFoC0254

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer

Foret à paliers Frontier / Avantgard
Frontier / Avantgard Stufenförmige Bohrer

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,50 / ø3,00 ●●	36,00	KYFoC5130
ø3,00 / ø3,50 ●●	36,00	KYFoC5135
ø3,50 / ø4,00 ●●	36,00	KYFoC5140
ø4,00 / ø4,50 ●●	36,00	KYFoC5145
ø4,50 / ø5,10 ●●	36,00	KYFoC5151

Forets corticales Frontier / Avantgard
Frontier / Avantgard Kortikalbohrer

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø3,65 ●●	30,00	KYFoC4336
ø4,00 ●●	30,00	KYFoC4340
ø4,50 ●●	30,00	KYFoC4345
ø4,90 ●●	30,00	KYFoC4349
ø5,90 ●●	30,00	KYFoC4359

Foret à paliers avec butée Monolith
Monolith Stufenförmige Bohrer mit Anschlag

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 / ø2,50 ●	32,00	KYFoC5251
	34,00	KYFoC5252
	36,00	KYFoC5253
ø2,50 / ø2,80 ●	32,00	KYFoC5281
	34,00	KYFoC5282
	36,00	KYFoC5283

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer



Foret boule Kugelpfandbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 ○	36,00	KYFoC1502



Foret initial Initialbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 ○	36,00	KYFoC1401



Forets coniques PEAK PEAK Konischer bohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø3,20 ●●	36,00	KYFoC7032
ø3,70 ●●	36,00	KYFoC7037
ø4,20 ●●	36,00	KYFoC7042



Forets corticales PEAK PEAK Kortikalbohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø3,65 ●●	30,00	KYFoC4337
ø4,15 ●●	30,00	KYFoC4342
ø4,65 ●●	30,00	KYFoC4347

Forets chirurgicaux - Chirurgische Bohrer



Forets à paliers PEAK PEAK Stufenförmige Bohrer		
Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
Ø2,00 / Ø2,80 ●●	36,00	KYFoC5128
Ø3,20 / Ø3,65 ●●	36,00	KYFoC5137
Ø3,70 / Ø4,15 ●●	36,00	KYFoC5142
Ø4,15 / Ø4,65 ●●	36,00	KYFoC5147

Tiges à fileter gmi - gmi Gewindeformer

Principales caractéristiques

- Tarauds usinés en acier inoxydable de haute qualité.
- Traitement thermique pour augmenter la dureté et résistance à l'usure.
- Vis deux entrées.
- Insertion avec cliquet dynamométrique ou fixe et adaptateur de cliquet réf. : KYLoFO022.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl bearbeitete Gewindeformer.
- Wärmebehandlung zur Erhöhung von Härte und Verschleißwiderstand.
- Gewinde mit zwei Eingängen.
- Insertion mit festem oder Drehmomentratschenschlüssel und Ratschenadapter Ref.: KYLoFO022.



Tiges à fileter pour toutes les plateformes Gewindeformer für alle Plattformen		
Vis (mm) Gewinde (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
Ø3,30x1,60 ●●	33,00	KYMoC0009
Ø3,75x1,60 ●●●	33,00	KYMoC0010
Ø4,00x1,60 ●	33,00	KYMoC0011
Ø4,25x1,60 ●●	33,00	KYMoC0016
Ø4,75x1,60 ●●	33,00	KYMoC0017
Ø5,00x1,60 ●	33,00	KYMoC0012
Ø5,75x1,60 ●●	33,00	KYMoC0018
Ø6,00x1,60 ●	33,00	KYMoC0015

Arrêts de forage - Bohrstopps



L1



L2



L3



S1



S2



S3

Arrêts de forage longs Länge Bohrstopps

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
L1 (Ø2.0 - Ø3.0)	6,50	KYToC0001
	8,00	KYToC0002
	10,00	KYToC0003
	11,50	KYToC0004
	13,00	KYToC0005
	15,00	KYToC0006
L2 (Ø3.2 - Ø4.3)	6,50	KYToC0008
	8,00	KYToC0009
	10,00	KYToC0010
	11,50	KYToC0011
	13,00	KYToC0012
	15,00	KYToC0013
L3 (Ø4.5 - Ø5.4)	6,50	KYToC0015
	8,00	KYToC0016
	10,00	KYToC0017
	11,50	KYToC0018
	13,00	KYToC0019

Arrêts de forage courts Kurze Bohrstopps

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
S1 (Ø2.0 - Ø3.0)	6,50	KYToC0020
	8,00	KYToC0021
	10,00	KYToC0022
	11,50	KYToC0023
S2 (Ø3.2 - Ø4.3)	6,50	KYToC0025
	8,00	KYToC0026
	10,00	KYToC0027
	11,50	KYToC0028
S3 (Ø4.5 - Ø5.4)	6,50	KYToC0030
	8,00	KYToC0031
	10,00	KYToC0032
	11,50	KYToC0033

Accessoires chirurgicaux - Chirurgische Zubehöerteile

Les accessoires chirurgicaux se composent des trépan gingivaux manuels et à connexion CA, des paralléliseurs et des mesureurs de profondeur. Le trépan gingival est l'élément chirurgical chargé de couper la muqueuse et de marquer l'os avant l'utilisation de la fraise à pointer. Les paralléliseurs sont les accessoires chargés de contrôler le parallélisme après l'utilisation de la fraise pilote et le fraisage initial et, pour finir, les jauges de profondeur sont les éléments chargés de contrôler la profondeur du fraisage avant l'insertion de l'implant.

Principales caractéristiques

- Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité.
- Finition extra-polissage pour faciliter les tâches de nettoyage et d'entretien.
- Trépan gingivaux traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité.
- Trépan gingivaux manuels conçus pour obtenir une coupe précise et centrée.
- Trépan gingivaux à connexion CA conçus pour obtenir une coupe précise et rapide.
- Marques de profondeur de tournage des mesureurs de 8 à 17 mm, ce qui les rend indélébiles.
- Paralléliseurs double diamètre pour économiser temps et espace.

Die chirurgischen Zubehöerteile bestehen aus manuellen Gingivastanzen mit Winkelteilverbindung, Parallelisierungspfosten und Tiefenmessern. Gingivastanzen dienen zum Anschneiden der Schleimhaut und Markieren des Knochens vor dem Gebrauch des lanzettenförmigen Bohrers. Parallelisierungspfosten dienen zur Überwachung der Parallelität nach dem Gebrauch des Pilotbohrers und den ersten Bohrvorgängen. Die Tiefenmesser schließlich dienen zur Kontrolle der Bohrtiefe vor dem Einsetzen des Implantats.

Hauptmerkmale

- In hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt.
- Abschließendes Hochglanzpolieren für leichtere Reinigung und Instandhaltung.
- Wärmebehandelte Gingivastanzen für größere Haltbarkeit.
- Spezielle entwickelte manuelle Gingivastanzen für präzisen und mittigen Schnitt.
- Gingivastanzen mit Winkelstückverbindung für präzisen und schnellen Schnitt.
- Gedrehte Tiefenmarkierungen von 8 bis 17 mm der Messgeräte um sie unlöslich zu machen.
- Parallelisierungspfosten mit doppeltem Durchmesser für Zeit- und Raumersparnis.



Trépan gingivaux manuels Manuelle Gingivastanzen

Ø Coupe Ø Schnitt	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
Ø5,00	23,00	KYLoF0024
Ø6,00	23,00	KYLoF0082

Trépan gingivaux connexion contre-angle Gingivastanzen Winkelstückverbindung

Ø Coupe Ø Schnitt	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
Ø3,50	25,00	KYLoC0142
Ø5,00	28,00	KYLoC0074
Ø6,00	28,00	KYLoC0075

Jauge de profondeur Tiefenmesser

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
Ø2,80	28,00	KYLoC0094
Ø3,50	28,00	KYLoC0095

Accessoires chirurgicaux - Chirurgische Zubehörteile



Jauge de profondeur PEAK
PEAK Tiefenmesser

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 ●●	25,80	KYLoC0164
ø3,20 ●●	25,80	KYLoC0159
ø3,70 ●●	25,80	KYLoC0160
ø4,20 ●●	25,80	KYLoC0161
ø2,50 ●●	25,80	KYLoC0165



Paralléliseur
Parallelisierungspfosten

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,00 - ø2,80 ●●●●●	24,00	KYLoC0078



Jauge de hauteur gingivale Avantgard
Avantgard gingivahöhe messer

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,80 - ø3,30 ●●	25,20	KYLoC0136



Jauge de hauteur gingivale Monolith
Monolith gingivahöhe messer

Diamètre (mm) Durchmesser (mm)	Longueur (mm) Länge (mm)	Référence Referenz
ø2,80 ●	14,00	KYLoC0141

Kit de tarauds gmi - gmi Gewindeformer-Kit

Le kit de tarauds gmi est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, qui contient tout le matériel nécessaire pour la correcte mise en place des systèmes d'implants gmi dans des os denses type I et type II, qui facilite le vissage de l'implant dans le site osseux et évite ainsi les problèmes associés au stress du vissage.

Das gmi Gewindeformer-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste und enthält das gesamte erforderliche Material für das fehlerfreie Einsetzen der gmi frontier Implantatsysteme in dichte Knochen Typ I und II, das das Gewindeschneiden des Implantats in das Knochenbett erleichtert und daher die mit dem Stress des Einschraubens verbundenen Probleme vermeidet.



Description - Beschreibung		Un.	Ref.
Tige à fileter CA ø3,30 P-1,60 mm	ø3,30 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0009
Tige à fileter CA ø3,75 P-1,60 mm	ø3,75 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0010
Tige à fileter CA ø4,00 P-1,60 mm	ø4,00 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0011
Tige à fileter CA ø5,00 P-1,60 mm	ø5,00 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0012
Tige à fileter CA ø6,00 P-1,60 mm	ø6,00 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0015
Tige à fileter CA ø4,25 P-1,60 mm	ø4,25 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0016
Tige à fileter CA ø4,75 P-1,60 mm	ø4,75 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0017
Tige à fileter CA ø5,75 P-1,60 mm	ø5,75 P-1,60 mm Winkelstück Gewindeformer	1	KYMoC0018
Adaptateur clef CA	HP Adapter für Spitzenhalter-Ratsche	1	KYLoF0022

kit de compacteurs osseux gmi - gmi Knochenverdichter-Kit

Le kit de compacteurs osseux gmi est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, qui contient tout le matériel nécessaire pour augmenter la stabilité primaire de l'implant sur des os de faible densité type III et type IV, et pour améliorer le traitement lors des élévations de sinus.

Das gmi Knochenverdichter-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste, die das gesamte für die Erhöhung der primären Stabilität des Implantats in Knochen mit niedriger Dichte Typ III und IV sowie zur Verbesserung der Behandlung beim Sinuslift erforderliche Material enthält.



Description - Beschreibung		Un.	Ref.
Compacteur os ø1,60 / ø2,80 mm	Knochenverdichter ø1,60 / ø2,80 mm	1	KYNoC0001
Compacteur os ø1,90 / ø3,40 mm	Knochenverdichter ø1,90 / ø3,40 mm	1	KYNoC0002
Compacteur os ø2,30 / ø3,90 mm	Knochenverdichter ø2,30 / ø3,90 mm	1	KYNoC0003
Compacteur os ø2,90 / ø4,30 mm	Knochenverdichter ø2,90 / ø4,30 mm	1	KYNoC0004
Compacteur élévateur sinus concave ø3,00 mm	Verdichter konkaver Sinuslift ø3,00 mm	1	KYNoC0005
Compacteur élévateur sinus concave ø4,00 mm	Verdichter konkaver Sinuslift ø4,00 mm	1	KYNoC0006
Foret pointeur	Lanzettenförmiger Bohrer	1	KYFoC1225
Clé porte-implant Phoenix HEX-3,00 mm courte	Phoenix Übertragungsschlüssel HEX-3,00 mm	1	KYLoF0123

kit prothétique gmi - gmi Prothetische-Kit

Le kit prothétique gmi est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, qui contient tout le matériel nécessaire pour la correcte mise en place de la gamme complète d'attachements des systèmes d'implants gmi. Le kit comprend également des piliers extracteurs pour le système avantgard.

Das gmi Prothetische-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste, die das gesamte für die richtige Platzierung des gesamten Spektrums von Attachments Implantatsysteme gmi. Das Kit enthält auch Abutment Extraktion für avantgard System.

KYCoF3007



Description · Beschreibung		Un.	Ref.
Clé pour pilier multi-esthétique HEX-1,20 mm en angle	Schlüssel angewinkelte multi-ästhetische Abut. HEX-1,20 mm	1	KYLoF0130
Clé multi/bio-esthétique HEX-2,00 mm	Multi/bio-ästhetische Schlüssel HEX-2,00 mm	1	KYLoC0149
Clé pour pilier multi-esthétique HEX-2,50 mm	Schlüssel für multi-ästhetische Abut. HEX-2,50 mm	1	KYLoC0098
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurz Ratschenschlüssel HEX-1,20 mm	1	KYLoF0128
Clé à cliquet longue HEX-1,20 mm	Lange Ratschenschlüssel HEX-1,20 mm	1	KYLoF0129
Clé pour pilier boule HEX-2,45 mm	Kugelaufbau Schlüssel HEX-2,45 mm	1	KYLoC0065
Clé HEX-1,20 mm CA moyenne	Mittlere W SechskantSchlüssel HEX-1,20 mm	1	KYLoC0004
Clé pour pilier Equator	Equator Abutment-Schlüssel	1	KYLoF0132
Clé extracteur de pilier Avantgard RP	Avantgard Abutment Extraktion Schlüssel RP	1	KYLoF0134
Clé extracteur de pilier Avantgard WP	Avantgard Abutment Extraktion Schlüssel WP	1	KYLoF0135

Kit de forets chirurgicaux courts gmi - gmi Kurze chirurgische Bohrer-Kit

Le kit de forets courts gmi est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, qui contient toute la gamme de fraises des systèmes gmi avec une longueur réduite, ce qui permet de broyer le lit d'os dans les cas d'une mauvaise ouverture de la bouche.

Das gmi Kurze Bohrer-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste, es enthält die vollständige Palette von Erdbeeren von gmi-Systemen mit reduzierter Länge, so dass in Fällen mit schlechter Mundöffnung des Knochenbettes Fräse.

KYCoF3008



Description · Beschreibung		Un.	Ref.
Foret hélicoïdal Ø2,80 mm	Spiralbohrer Ø2.80 mm	1	KYFoC0228
Foret hélicoïdal Ø3,00 mm	Spiralbohrer Ø3.00 mm	1	KYFoC0230
Foret hélicoïdal Ø3,25 mm	Spiralbohrer Ø3.25 mm	1	KYFoC0232
Foret hélicoïdal Ø3,50 mm	Spiralbohrer Ø3.50 mm	1	KYFoC0235
Foret hélicoïdal Ø4,00 mm	Spiralbohrer Ø4.00 mm	1	KYFoC0240
Foret hélicoïdal Ø4,25 mm	Spiralbohrer Ø4.25 mm	1	KYFoC0243
Foret hélicoïdal Ø5,10 mm	Spiralbohrer Ø5.10 mm	1	KYFoC0251
Foret hélicoïdal Ø5,40 mm	Spiralbohrer Ø5.40 mm	1	KYFoC0254
Foret pointeur	Lanzenförmige Bohrer	1	KYFoC1225
Foret pilote Ø2,00 mm	Pilotbohrer Ø2.00 mm	1	KYFoC2222

Kit de forets gmi frontier/avantgard - gmi frontier/avantgard chirurgische Bohrer-Kit

Le kit de forets frontier/avantgard est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, contient la gamme complète de forets qui, avec le kit chirurgical PEAK permettent la mise en place des 4 systèmes d'implants.

Das frontier/avantgard Bohrer-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste, es enthält die gesamte Palette an Bohrern, die zusammen mit dem PEAK-Chirurgie-Kit die Platzierung der 4 Implantatsysteme ermöglichen.

KYCoF3045



Description · Beschreibung		Un.	Ref.
Foret pilote ø2,50 mm	Pilotbohrer ø2.50 mm	1	KYFoC2250
Foret à paliers ø2,50 / ø3,00 mm	Stufenförmige bohrer ø2.50 / ø3.00 mm	1	KYFoC5130
Foret à paliers ø3,00 / ø3,50 mm	Stufenförmige bohrer ø3.00 / ø3.50 mm	1	KYFoC5135
Foret à paliers ø3,50 / ø4,00 mm	Stufenförmige bohrer ø3.50 / ø4.00 mm	1	KYFoC5140
Foret à paliers ø4,00 / ø4,50 mm	Stufenförmige bohrer ø4.00 / ø4.50 mm	1	KYFoC5145
Foret cortical ø3,65 mm	Kortikalbohrer ø3.65 mm	1	KYFoC4336
Foret cortical ø4,00 mm	Kortikalbohrer ø4.00 mm	1	KYFoC4340
Foret cortical ø4,50 mm	Kortikalbohrer ø4.50 mm	1	KYFoC4345
Foret cortical ø4,90 mm	Kortikalbohrer ø4.90 mm	1	KYFoC4349
Foret cortical ø5,90 mm	Kortikalbohrer ø5.90 mm	1	KYFoC4359

Kit de forets gmi PEAK - gmi PEAK chirurgische Bohrer-Kit

Le kit de forets PEAK est constitué d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique de haute résistance, qui contient toute la gamme complète de forets qui, avec le kit chirurgical Frontier/Avantgard permettent la mise en place des 4 systèmes d'implants.

Das PEAK Bohrer-Kit besteht aus einer autoklavierbaren in technischem Harz angefertigten hochfesten Kiste, es enthält die gesamte Palette an Bohrern, die zusammen mit dem Frontier/Avantgard-Chirurgie-Kit die Platzierung der 4 Implantatsysteme ermöglichen.

KYCoF3044



Description · Beschreibung		Un.	Ref.
Foret à paliers ø2,00 / ø2,80 mm	Stufenförmige bohrer ø2.00 / ø2.80 mm	1	KYFoC5128
Foret à paliers ø3,20 / ø3,65 mm	Stufenförmige bohrer ø3.20 / 3.65 mm	1	KYFoC5137
Foret à paliers ø3,70 / ø4,15 mm	Stufenförmige bohrer ø3.70 / ø4.15 mm	1	KYFoC5142
Foret à paliers ø4,15 / ø4,65 mm	Stufenförmige bohrer ø4.15 / ø4.65 mm	1	KYFoC5147
Foret conique ø3,20 mm	Konischer bohrer ø3.20 mm	1	KYFoC7032
Foret conique ø3,70 mm	Konischer bohrer ø3.70 mm	1	KYFoC7037
Foret conique ø4,20 mm	Konischer bohrer ø4.20 mm	1	KYFoC7042
Foret cortical ø3,65 mm	Kortikalbohrer ø3.65 mm	1	KYFoC4337
Foret cortical ø4,15 mm	Kortikalbohrer ø4.15 mm	1	KYFoC4342
Foret cortical ø4,65 mm	Kortikalbohrer ø4.65 mm	1	KYFoC4347

Kits de arrêts de forets gmi - gmi Bohrstopps-Kits

Les kits de arrêts de forets gmi se composent d'une boîte autoclavable fabriquée en plastique technique, qui contient tout le matériel nécessaire pour la pose des butées sur les forets gmi, ce qui permet de contrôler la profondeur du fraisage dans le site osseux.

Die gmi Bohrstopps-Kits bestehen aus einem autoklavierbarem Behälter aus technischem Kunststoff, der alles notwendige Material für die Befestigung des Aufsatzes auf dem gmi Bohrer enthält und ermöglicht die Tiefeneinstellung der Bohrung des Implantatbetts im Knochen.

KYCoF3010



Arrêts de forets longs - Länge Bohrstopps

Longueur (mm) Länge (mm)	L1 (Ø2.0 - Ø3.0)	L2 (Ø3.2 - Ø4.3)	L3 (Ø4.5 - Ø5.4)
6,50	KYToC0001	KYToC0008	KYToC0015
8,00	KYToC0002	KYToC0009	KYToC0016
10,00	KYToC0003	KYToC0010	KYToC0017
11,50	KYToC0004	KYToC0011	KYToC0018
13,00	KYToC0005	KYToC0012	KYToC0019

Outil extracteur de arrêts de forets longs

Länge Bohrstop Extraktion Schlüssel

KYToC0034

KYCoF3011



Arrêts de forets courts - Kurze Bohrstopps

Longueur (mm) Länge (mm)	S1 (Ø2.0 - Ø3.0)	S2 (Ø3.2 - Ø4.3)	S3 (Ø4.5 - Ø5.4)
6,50	KYToC0020	KYToC0025	KYToC0030
8,00	KYToC0021	KYToC0026	KYToC0031
10,00	KYToC0022	KYToC0027	KYToC0032
11,50	KYToC0023	KYToC0028	KYToC0033

Outil extracteur de arrêts de forets courts

Kurze Bohrstop Extraktion Schlüssel

KYToC0035

Kits d'insertion de base gmi - gmi Basis Insertion Kits

Les kits d'insertion de base gmi contiennent le matériel nécessaire pour la correcte insertion des différents systèmes d'implants.

Die gmi basis Insertion kits beinhalten das notwendige Material für das korrekte Einsetzen der verschiedenen Implantatsysteme.



KYCoF0003

Composants kit d'insertion de base Phoenix Phoenix basis Insertion Kit Komponenten

Description · Beschreibung	Ref.
Clé porte-implant HEX-3,00 mm CA	Phoenix basis Insertion kit Komponenten KYLoF0122
Clé porte-implant HEX-3,00 mm IP courte	Kurzer HEX-3,00 mm TI Übertragungsschlüssel KYLoF0123
Clé porte-implant HEX-3,00 mm IP longue	Langer HEX-3,00 mm TI Übertragungsschlüssel KYLoF0124
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel KYLoF0128
Clé de transfert plate 45°	Flacher Übertragungsschlüssel 45° KYLoC0093



KYCoF0013

Composants kit d'insertion de base Frontier Frontier basis Insertion Kit Komponenten

Description · Beschreibung	Ref.
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel KYLoF0128
Clé porte-implant HEX-2,45 mm IP courte	Kurzer HEX-2,45 mm TI Übertragungsschlüssel KYLoF0096
Clé porte-implant HEX-2,45 mm CA	HEX-2,45 mm HP Übertragungsschlüssel KYLoF0091



KYCoF0018

Composants kit d'insertion de base Frontier PEAK Frontier PEAK basis Insertion Kit Komponenten

Description · Beschreibung	Ref.
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel KYLoF0128
Clé porte-implant HEX-2,45 mm IP courte	Kurzer HEX-2,45 mm TI Übertragungsschlüssel KYLoF0096
Clé porte-implant HEX-2,45 mm CA	HEX-2,45 mm HP Übertragungsschlüssel KYLoF0091
Clé porte-implant HEX-2,45 mm IP longue	Lange HEX-2,45 mm TI Übertragungsschlüssel KYLoF0111



KYCoF0015

Composants kit d'insertion de base Avantgard Avantgard basis Insertion Kit Komponenten

Description · Beschreibung	Ref.
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel KYLoF0128
Clé porte-implant HEX-3,00 mm IP courte	Kurz HEX-3,00 mm Übertragungsschlüssel KYLoF0137
Clé porte-implant HEX-3,00 mm IP longue	Lange HEX-3,00 mm Übertragungsschlüssel KYLoF0138
Clé porte-implant HEX-3,00 mm CA	HEX-3,00 mm Übertragungsschlüssel KYLoF0136
Clé manuelle 45°	Handschauber 45° KYLoC0093

Kits d'insertion de base gmi - gmi Basis Insertion Kits



KYCoF0017

Composants kit d'insertion de base Avantgard PEAK Avantgard PEAK basis Insertion Kit Komponenten

Description - Beschreibung		Ref.
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel	KYLoF0128
Clé Avantgard RP CA courte	Kurz W Avantgard RP Schlüssel	KYLoC0151
Clé Avantgard RP CCIP courte	Tirl-Kurz W Avantgard RP Schlüssel	KYLoC0157
Clé Avantgard RP CCIP longue	Tirl-Lang W Avantgard RP Schlüssel	KYLoC0162



KYCoF0016

Composants kit d'insertion de base Monolith Monolith basis Insertion Kit Komponenten

Descripción - Description.		Ref.
Clé à cliquet courte HEX-1,20 mm	Kurzer HEX-1,20 mm Ratschenschlüssel	KYLoF0128
Clé porte-implant Hex-2,50 mm CCIP courte	Kurz Sechskanthandschlüssel 2,5 mm TIRL	KYLoF0139
Clé porte-implant Hex-2.50 mm CA courte	Kurz W Sechskanthandschlüssel 2,5 mm	KYLoF0140
Extracteur Monolith RP CCIP	Monolith Extraktion RP TIRL	KYLoF0143

Kit chirurgie guidée full gmi frontier - gmi frontier Complet Geführte Chirurgische-kit

Le kit de chirurgie guidée full gmi Frontier se compose d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique haute résistance, qui contient tout le matériel nécessaire pour effectuer des chirurgies entièrement guidées d'implants gmi frontier de $\varnothing 3,30$ / $\varnothing 3,75$ / $\varnothing 4,25$ et $\varnothing 4,75$ mm et longueurs comprises entre 8 et 15 mm.

Das Kit für gmi frontier komplett geführte Chirurgie besteht aus einem auto-klavierbarem Behälter aus technischem Harz hoher Festigkeit, der alles notwendige Material enthält, um eine komplett geführte Chirurgie von Frontier-GMI-Implantaten von $\varnothing 3,30$ / $\varnothing 3,75$ / $\varnothing 4,25$ und $\varnothing 4,75$ mm und einer Länge zwischen 8 und 15 mm.

KYCoF3046



Description · Beschreibung.	Un.	Ref.
Foret pointeur	Lanzettenförmiger Bohrer	1 KYFoC6064
Trépan gingival CA $\varnothing 4,10$ mm	HP Gingivastanzen $\varnothing 4,10$ mm	1 KYFoC6065
Trépan gingival CA $\varnothing 5,10$ mm	HP Gingivastanzen $\varnothing 5,10$ mm	1 KYFoC6066
Foret DLC $\varnothing 2,00$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,00$ L 8,00 mm	1 KYFoC6067
Foret DLC $\varnothing 2,00$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,00$ L 10,00 mm	1 KYFoC6068
Foret DLC $\varnothing 2,00$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,00$ L 11,50 mm	1 KYFoC6069
Foret DLC $\varnothing 2,00$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,00$ L 13,00 mm	1 KYFoC6070
Foret DLC $\varnothing 2,00$ L 15,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,00$ L 15,00 mm	1 KYFoC6071
Foret DLC $\varnothing 2,80$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,80$ L 8,00 mm	1 KYFoC6072
Foret DLC $\varnothing 2,80$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,80$ L 10,00 mm	1 KYFoC6073
Foret DLC $\varnothing 2,80$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,80$ L 11,50 mm	1 KYFoC6074
Foret DLC $\varnothing 2,80$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,80$ L 13,00 mm	1 KYFoC6075
Foret DLC $\varnothing 2,80$ L 15,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 2,80$ L 15,00 mm	1 KYFoC6076
Foret DLC $\varnothing 3,00$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,00$ L 8,00 mm	1 KYFoC6077
Foret DLC $\varnothing 3,00$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,00$ L 10,00 mm	1 KYFoC6078
Foret DLC $\varnothing 3,00$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,00$ L 11,50 mm	1 KYFoC6079
Foret DLC $\varnothing 3,00$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,00$ L 13,00 mm	1 KYFoC6080
Foret DLC $\varnothing 3,00$ L 15,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,00$ L 15,00 mm	1 KYFoC6081
Foret DLC $\varnothing 3,50$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,50$ L 8,00 mm	1 KYFoC6082
Foret DLC $\varnothing 3,50$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,50$ L 10,00 mm	1 KYFoC6083
Foret DLC $\varnothing 3,50$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,50$ L 11,50 mm	1 KYFoC6084
Foret DLC $\varnothing 3,50$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,50$ L 13,00 mm	1 KYFoC6085
Foret DLC $\varnothing 3,50$ L 15,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 3,50$ L 15,00 mm	1 KYFoC6086
Foret DLC $\varnothing 4,00$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,00$ L 8,00 mm	1 KYFoC6087
Foret DLC $\varnothing 4,00$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,00$ L 10,00 mm	1 KYFoC6088
Foret DLC $\varnothing 4,00$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,00$ L 11,50 mm	1 KYFoC6089
Foret DLC $\varnothing 4,00$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,00$ L 13,00 mm	1 KYFoC6090
Foret DLC $\varnothing 4,00$ L 15,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,00$ L 15,00 mm	1 KYFoC6091

Description · Beschreibung.	Un.	Ref.
Foret DLC $\varnothing 4,50$ L 8,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,50$ L 8,00 mm	1 KYFoC6092
Foret DLC $\varnothing 4,50$ L 10,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,50$ L 10,00 mm	1 KYFoC6093
Foret DLC $\varnothing 4,50$ L 11,50 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,50$ L 11,50 mm	1 KYFoC6094
Foret DLC $\varnothing 4,50$ L 13,00 mm	DLC Bohrer $\varnothing 4,50$ L 13,00 mm	1 KYFoC6095
Foret à chanfreiner DLC $\varnothing 3,30$ mm	DLC Versenkbohrer $\varnothing 3,30$ mm	1 KYFoC6096
Foret à chanfreiner DLC $\varnothing 3,75$ mm	DLC Versenkbohrer $\varnothing 3,75$ mm	1 KYFoC6097
Foret à chanfreiner DLC $\varnothing 4,25$ mm	DLC Versenkbohrer $\varnothing 4,25$ mm	1 KYFoC6098
Foret à chanfreiner DLC $\varnothing 4,75$ mm	DLC Versenkbohrer $\varnothing 4,75$ mm	1 KYFoC6099
Transporteur implants RP + vis	RP Implantat Transfertteil + Schraube	8 KYLoF6100
Transporteur implants WP + vis	WP Implantat Transfertteil + Schraube	2 KYLoF6101
Extracteur transporteurs	TrägerExtraktor	1 KYLoC6051
Adaptateur HEX-4,00 mm IP courte	Kurzer HEX-4,00 mm TI adapter	1 KYLoC6052
Adaptateur HEX-4,00 mm IP longue	Langer HEX-4,00 mm TI adapter	1 KYLoC6053
Clé porte-implant HEX-3 CA courte	Kurz W Sechskanthandschlüssel HEX-3	1 KYLoF6155
Clé porte-implant HEX-3 CA longue	Lang W Sechskanthandschlüssel HEX-3	1 KYLoF6156
Clé HEX-1,20 mm CA moyenne	Mittlere W Sechskantschlüssel 1,2	1 KYLoC0004
Clé HEX-1,20 mm CA longue	Lang W Sechskantschlüssel 1,2	1 KYLoC0064
Adaptateur clés CA	HP Schlüsseladapter	1 KYLoF0022
Pin latéral attelle	Lateral Pin - Schiene	3 KYLoC6059
Clé à cliquet IP	TI Ratschenschlüssel	1 KYLoF6113
Foret Pin $\varnothing 1,50$ mm	Pinbohrer $\varnothing 1,50$ mm	1 KYFoC6060

**Toutes les références sont vendues séparément comme pièces de rechange
Alle Referenzen werden separat als Ersatzteile verkauft

Accessoires - Zubehörteile

Description · Beschreibung	Un.	Ref.
Douille pin latéral pour attelle	Hülse laterale Pin - Schiene	5 KYLoF6061
Douille pour attelle $\varnothing 5,10$ mm	Hülse für Schiene von $\varnothing 5,10$ mm	5 KYLoF6102

Kits chirurgie guidée gmi frontier - gmi frontier Geführte Chirurgische-kits

Le kit de chirurgie guidée gmi Frontier se compose d'une boîte autoclavable fabriquée en résine technique haute résistance, qui contient tout le matériel nécessaire pour effectuer des chirurgies entièrement guidées d'implants gmi frontier de Ø3,30 / Ø3,75 et Ø4,25 mm et longueurs comprises entre 8 et 13 mm.

Das Kit für gmi frontier geführte Chirurgie besteht aus einem autoklavierbarem Behälter aus technischem Harz hoher Festigkeit, der alles notwendige Material enthält, um eine komplett geführte Chirurgie von Frontier-GMI-Implantaten von Ø3,30 / Ø3,75 und Ø4,25 mm und einer Länge zwischen 8 und 13 mm.

KYCoF3015



Description - Beschreibung.	Un.	Ref.
Foret pointeur	Lanzettenförmiger Bohrer	1 KYFoC6064
Trépan gingival CA Ø4,10 mm	HP Gingivastanzen Ø4,10 mm	1 KYFoC6065
Foret DLC Ø2,00 L 8,00 mm	DLC Bohrer Ø2,00 L 8,00 mm	1 KYFoC6067
Foret DLC Ø2,00 L 10,00 mm	DLC Bohrer Ø2,00 L 10,00 mm	1 KYFoC6068
Foret DLC Ø2,00 L 11,50 mm	DLC Bohrer Ø2,00 L 11,50 mm	1 KYFoC6069
Foret DLC Ø2,00 L 13,00 mm	DLC Bohrer Ø2,00 L 13,00 mm	1 KYFoC6070
Foret DLC Ø2,80 L 8,00 mm	DLC Bohrer Ø2,80 L 8,00 mm	1 KYFoC6072
Foret DLC Ø2,80 L 10,00 mm	DLC Bohrer Ø2,80 L 10,00 mm	1 KYFoC6073
Foret DLC Ø2,80 L 11,50 mm	DLC Bohrer Ø2,80 L 11,50 mm	1 KYFoC6074
Foret DLC Ø2,80 L 13,00 mm	DLC Bohrer Ø2,80 L 13,00 mm	1 KYFoC6075
Foret DLC Ø3,00 L 8,00 mm	DLC Bohrer Ø3,00 L 8,00 mm	1 KYFoC6077
Foret DLC Ø3,00 L 10,00 mm	DLC Bohrer Ø3,00 L 10,00 mm	1 KYFoC6078
Foret DLC Ø3,00 L 11,50 mm	DLC Bohrer Ø3,00 L 11,50 mm	1 KYFoC6079
Foret DLC Ø3,00 L 13,00 mm	DLC Bohrer Ø3,00 L 13,00 mm	1 KYFoC6080
Foret DLC Ø3,50 L 8,00 mm	DLC Bohrer Ø3,50 L 8,00 mm	1 KYFoC6082
Foret DLC Ø3,50 L 10,00 mm	DLC Bohrer Ø3,50 L 10,00 mm	1 KYFoC6083
Foret DLC Ø3,50 L 11,50 mm	DLC Bohrer Ø3,50 L 11,50 mm	1 KYFoC6084
Foret DLC Ø3,50 L 13,00 mm	DLC Bohrer Ø3,50 L 13,00 mm	1 KYFoC6085
Foret DLC Ø4,00 L 8,00 mm	DLC Bohrer Ø4,00 L 8,00 mm	1 KYFoC6087

Description - Beschreibung.	Un.	Ref.
Foret DLC Ø4,00 L 10,00 mm	DLC Bohrer Ø4,00 L 10,00 mm	1 KYFoC6088
Foret DLC Ø4,00 L 11,50 mm	DLC Bohrer Ø4,00 L 11,50 mm	1 KYFoC6089
Foret DLC Ø4,00 L 13,00 mm	DLC Bohrer Ø4,00 L 13,00 mm	1 KYFoC6090
Foret à chanfreiner DLC Ø3,30 mm	DLC Versenkbohrer Ø3,30 mm	1 KYFoC6096
Foret à chanfreiner DLC Ø3,75 mm	DLC Versenkbohrer Ø3,75 mm	1 KYFoC6097
Foret à chanfreiner DLC Ø4,25 mm	DLC Versenkbohrer Ø4,25 mm	1 KYFoC6098
Transporteur implants RP + vis	RP Implantat Transferteil + Schraube	4 KYLoF6100
Extracteur transporteurs	TrägerExtraktor	1 KYLoC6051
Adapteur HEX-4,00 mm IP courte	Kurzer HEX-4,00 mm TI adapter	1 KYLoC6052
Adapteur HEX-4,00 mm IP longue	Langer HEX-4,00 mm TI adapter	1 KYLoC6053
Clé porte-implant HEX-3 CA courte	Kurz W Sechskanthandschlüssel HEX-3	1 KYLoF0155
Clé porte-implant HEX-3 CA longue	Lang W Sechskanthandschlüssel HEX-3	1 KYLoF0156
Clé HEX-1,20 mm CA moyenne	Mittlere W Sechskantschlüssel 1,2	1 KYLoC0004
Clé HEX-1,20 mm CA longue	Lang W Sechskantschlüssel 1,2	1 KYLoC0064
Adaptateur clés CA	HP Schlüsseladapter	1 KYLoF0022
Pin latéral attelle	Lateral Pin - Schiene	3 KYLoC6059
Clé à cliquet IP	TI Ratschenschlüssel	1 KYLoF0113
Foret Pin Ø1,50 mm	Pinbohrer Ø1,50 mm	1 KYFoC6060

Accessoires - Zubehöerteile

Description - Beschreibung	Un.	Ref.
Douille pin latéral pour attelle	Hülse laterale Pin - Schiene	5 KYLoF6061
Douille pour attelle Ø5,10 mm	Hülse für Schiene von Ø5,10 mm	5 KYLoF6102


**Toutes les références sont vendues séparément comme pièces de rechange
Alle Referenzen werden separat als Ersatzteile verkauft

Description de l'étiquetage - Beschreibung der Etikettierung


Le tableau ci-après décrit la signification des symboles qui apparaissent sur les étiquettes et les emballages des instruments du système dentaire.

In der Tabelle werden alle Symbole, die auf den Etiketten und Kisten der Zahnsystem Instrumente erscheinen, einzeln aufgeführt.

1		Référence- Referenz
2		Numéro de Lot - Lot-Nummer
3		Identifiant unique du produit Eindeutige Produktkennung
4		Dispositif médical - Medizinisches Gerät
5		Date de fabrication Herstellungsdatum
6		Conforme aux normes européennes Europäisches Konformitätszeichen
7	Rx Only	Vente limitée aux dentistes ou médecins autorisés Beschränkter Verkauf an Zahnärzte und bevollmächtigte Ärzte
8		Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé ou précédemment ouvert Nicht zu verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder bereits geöffnet wurde
9		Non stérile - Nicht-steril
10		Instructions d'Utilisation Électroniques* Elektronische Gebrauchsanweisung*
11		Fabricant - Herstellers

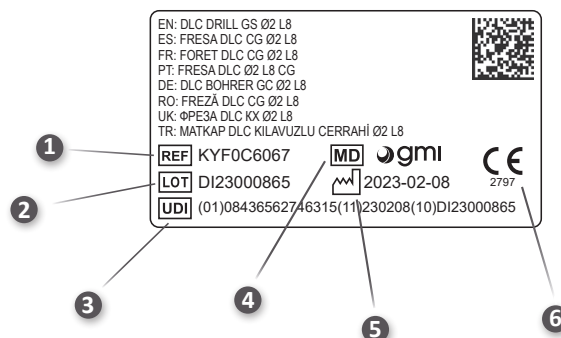

Spécifications DataMatrix d'étiquettes - Spezifizierung des DataMatrix der Etiketten

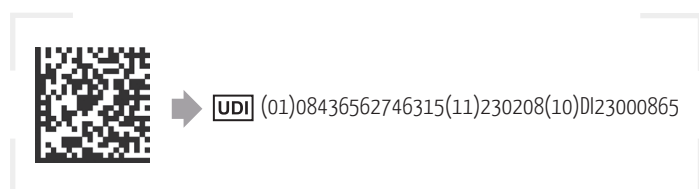



- 01 - GTIN de l'étiquetage des produits - GTIN Produktkennzeichnung
- 11 - Date de fabrication (année/mois/jour) - Herstellungsdatum (Jahr/Monat/Tag)
- 10 - Numéro de Lot - Lot-Nummer

* Conditions minimales pour ouvrir et télécharger les instructions d'utilisation électroniques :

- Une connectivité internet stable.
- Un appareil doté d'un système d'exploitation moderne qui prend en charge l'affichage des PDF.
- Un espace de stockage suffisant sur votre appareil.
- Un navigateur web tel que Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Opera installé sur votre appareil.
- Une application de lecture PDF installée sur votre appareil.

* Mindestanforderungen zum Öffnen und Herunterladen elektronischer Gebrauchsanweisungen:

- Stabile Internetverbindung.
- Ein Gerät mit einem modernen Betriebssystem, das die PDF-Anzeige unterstützt.
- Ausreichend Speicherplatz auf Ihrem Gerät.
- Ein Webbrowser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge oder Opera ist auf Ihrem Gerät installiert.
- Eine auf Ihrem Gerät installierte PDF-Reader-App.

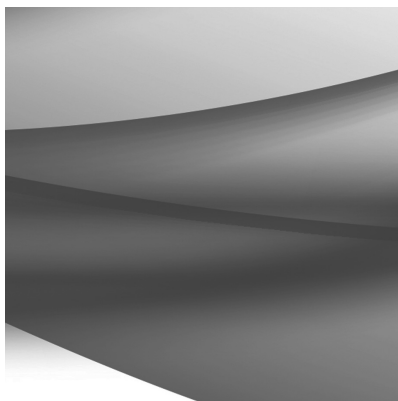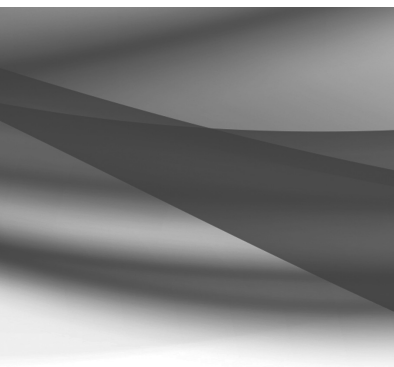

 **GMI**
Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre
C/ Enginyer Mies 705-B
25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350
info@gmidental.com
www.gmidental.com



Distribué par:
Vertrieb:



03/2024